

### V 601

# **Der Franck-Hertz Versuch**

Felix Symma Joel Koch felix.symma@tu-dortmund.de joel.koch@tu-dortmund.de

Durchführung: 12.04.2022 Abgabe: 19.04.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung						
2	Theorie2.1Aufbau und Ablauf des Franck-Hertz Experimentes2.2Fehlerquellen und Störungen						
3	Durchführung	7					
4	Auswertung4.1Bestimmung der freien Weglänge4.2Integrale Energieverteilung4.3Interpretation der Franck-Hertz Kurven	8					
5	5 Diskussion						
Literatur							

### 1 Zielsetzung

Im folgenden Versuch sollen die diskreten Energiewerte der Elektronenhülle des Hg-Atoms untersucht werden. Dazu wird die integrale Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bei zwei unterschiedlichen Temperaturen untersucht. Anschließend werden für zwei weitere Temperaturen Franck-Hertz-Kurven aufgenommen.

#### 2 Theorie

Zur Strukturaufklärung der Elektronenhüllen werden Elektronenstoßexperimente durchgeführt. Dazu werden Elektronen mit geeigneter Energie auf Atome geschossen. Es wird der dabei entstehende Energieverlust der Elektronen genutzt, Informationen über die Struktur zu erhalten.

#### 2.1 Aufbau und Ablauf des Franck-Hertz Experimentes

Die Franck-Hertz Apparatur ist schematisch in der Abbildung 1 dargestellt.

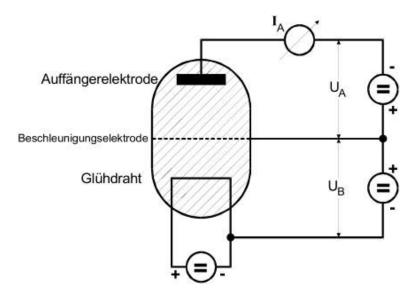


Abbildung 1: Schematische Darstellung des Franck-Hertz Versuches [1].

Der Versuch besteht aus einem evakuierten Gefäß, in dem sich die auf die Struktur der Elektronenhülle zu untersuchende Probe befindet. In dem folgenden Versuch wird Quecksilber verwendet. In der Glasglocke ist ein Draht angebracht, der aus einem hochschmelzenden Metall besteht. Dieser wird durch Gleichstrom erhitzt, weshalb infolge des glühelektrischen Effektes Elektronen austreten. Der Glühdraht wird außerdem noch mit einem Oxid eines Erdalkalimetalls bestrichen, was die Austrittsarbeit W herabsetzt. Die Austrittsarbeit ist dabei die für den Austritt von Elektronen benötigte Energie innerhalb

einer Zeiteinheit. Dadurch dass die Austrittsarbeit herabgesetzt wird, treten mehr Elektronen aus dem Draht. Gegenüber der Heizelektrode ist eine Beschleunigungsanode, also eine gitterförmige, positiv geladenen Elektrode mit der Spannung  $U_{\rm B}$ . Sie sorgt dafür, dass die Elektronen beschleunigt werden. Nach durchlaufen der Strecke zwischen dem Glühdraht und der Beschleunigungsanode erhalten die Elektronen die kinetische Energie mit dem Betrag

$$\frac{1}{2}m_0^2v^2 = e_0U_{\rm B}. (1)$$

Dabei ist  $e_0$  die Elementarladung,  $m_0$  die Masse der Elektronen,  $v_{vor}$  die Geschwindigkeit vor der Beschleunigungsphase und  $U_{\rm B}$  die Beschleunigungsspannung. Die Gleichung (1) ist allerdings nur gültig, sofern die Geschwindigkeit der Elektronen zu Beginn der Beschleunigung null ist.

Hinter der Beschleunigungsanode befindet sich die Auffängerelektrode, an der die auftreffenden Elektronen gemessen werden. Die Energiemessung geschieht über die Gegenfeldmethode, weshalb die Auffängerelektrode selbst auch eine geringe Gegenspannung  $U_{\rm A}$  besitzt. Das dadurch entstehende Gegenfeld können nur die Elektronen durchlaufen, deren Geschwindigkeitskomponente in Feldrichtung  $v_z$  die folgende Ungleichung erfüllt

$$\frac{1}{2}m_0 v_z^2 \ge e_0 U_{\rm A}. \tag{2}$$

Im Beschleunigungsraum befinden sich demnach Hg-Atome, mit denen die Elektronen zusammenstoßen. Wenn die Energie der Elektronen nicht groß genug ist, führen sie elastische Stöße durch. Die Energieabgabe  $\Delta E$  an das Hg-Atom ist hier allerdings zu vernachlässigen, da der Massenunterschied zwischen den beiden Stoßpartnern zu hoch ist. Sie beträgt

$$\Delta E = \frac{4m_0 M}{(m_0 + M)^2} \approx 1.1 \cdot 10^{-5} \,\text{J}.\tag{3}$$

Die Richtungsänderungen der Elektronen ist allerdings für die Ergebnisse von großer Wichtigkeit. Darauf wird in Unterabschnitt 2.2 nochmal eingegangen. Die zweite Stoßmöglichkeit zwischen Elektronen und Hg-Atomen ist unelastisch. Wenn die Energie der Elektronen durch die Beschleunigung größer oder gleich groß der Energiedifferenz des ersten angeregten Zustandes und des Grundzustandes des Hg-Atoms ist, dann regt das Elektron dieses an. Das Elektron gibt genau die Energie  $\Delta E = E_1 - E_0$  an die Atomhülle ab. Dabei bezeichnet  $E_1$  die Energie des ersten Zustandes und  $E_0$  die des Grundzustandes. Das Hg-Atom ist nun in einem angeregten Zustand. Beim Übergang zurück in den Grundzustand emittiert es ein Lichtquant, also ein Photon, mit der Energie

$$hf = E_1 - E_0$$
.

Die Frequenz wird mit f bezeichnet und h ist hierbei das Planck'sche Wirkungsquantum. Wird die Beschleunigungsspannung  $U_{\rm B}$  kontinuierlich erhöht, treten auch mehr Stöße auf und die Elektronen besitzen nicht mehr genügend Energie, um gegen das Bremsfeld

anzukommen. Deshalb verringert sich der Auffängerstrom  $I_{\rm A}$  über den zeitlichen Verlauf gesehen immer wieder und es ergibt sich der Kurvenverlauf, der aus Abbildung 2 abzulesen ist. Die Abstände zwischen den einzelnen Peaks  $U_n$  ist über die folgende Relation zu berechnen.

$$U_n = \frac{1}{e_0} (E_n - U_{n-1}). (4)$$

Dabei bezeichnet  $U_n$  den Abstand zweier aufeinander folgender Maxima und analog dazu  $E_n$  und  $E_{n-1}$  die Anregungspotentiale der Elektronenhülle.

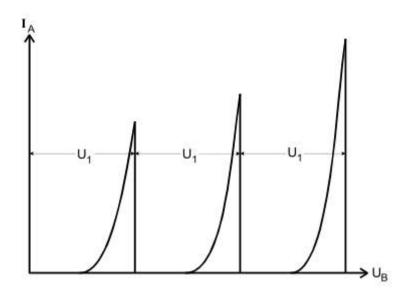


Abbildung 2: Kurvenverlauf des Auffängerstromes  $I_{\rm A}$  gegen die Bremsspannung  $U_{\rm B}$  [1].

#### 2.2 Fehlerquellen und Störungen

Die Ergebnisse aus dem Versuch werden allerdings nicht die ideale Franck-Hertz Kurve ergeben, wie sie in Abbildung 2 abgebildet ist. Die Gründe für mögliche Störungen und erwartbahre Fehlerquellen werden im folgenden dargestellt.


Der erste Grund ist auf den Einfluss des Kontaktpotentials zurückzuführen. Das Beschleunigungspotential zwischen dem Glühdraht und der Beschleunigungsanode ist von der von außen angelegten Spannung verschieden, da die Elektroden aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Durch die unterschiedlichen Materialien haben die Elektroden auch unterschiedliche Austrittsarbeiten für die Elektronen und das tatsächliche Beschleunigungspotential  $U_{\rm B,\ eff}$  ist definiert zu

$$U_{\rm B, eff} = U_{\rm B} - \frac{1}{e_0} (\phi_{\rm B} - \phi_{\rm G}).$$
 (5)

Wobei der Ausdruck

$$K = \frac{1}{e_0} (\phi_{\rm B} - \phi_{\rm G}) \tag{6}$$

das Kontaktpotential ist,  $\phi_G$  die Austrittsarbeit aus dem Glühdraht und  $\phi_B$  die Austrittsarbeit aus der Beschleunigungselektrode ist. Das Potentialgefälle ist außerdem durch die Abbildung 3 verbildlicht.

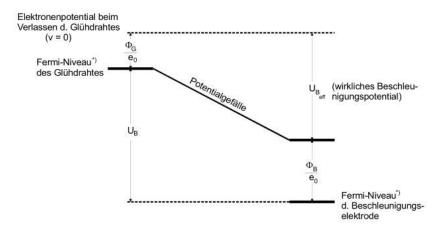

**Abbildung 3:** Die Potentialverhätlnisse zwischen dem Glühdraht und der Beschleunigungsanode [1].

Der zweite Grund für die Abweichungen zu der idealen Kurve ist das Energiespektrum der Elektronen. Beim Austreten der Elektronen aus dem Glühdraht durch den glühelektrischen Effekt haben die Elektronen nicht alle die gleiche Anfangsgeschwindigkeit. Nach der Beschleunigungsphase haben sie somit eine Energieverteilung, die bei  $U_{\rm B,\ eff}$  beginnt und kontinuierlich steigt. Somit setzen die unelastischen Stöße nicht bei einer genau definierten Beschleunigungsspannung ein und sind stattdessen über einen gewissen Bereich verteilt. Die Kurve fällt deshalb nach einem Maximum nicht auf den Wert null herab, sondern sinkt auf ein gewisses Stromminimum herab.

Außerdem ist der Einfluss der elastischen Zusammenstöße zwischen Elektronen und Atomen zu nennen. Diese führen, wie bereits erwähnt, zwar nicht zu merklichen Energieabnahmen, jedoch ändern sie die Richtung der Elektronen beträchtlich. Finden diese im Raum zwischen Kathode und Beschleunigungsanode statt, dann tragen sie nicht wesentlich zur Franck-Hertz Kurve bei. Im Raumbereich zwischen der Beschleunigungsund der Auffängerelektrode führen sie dazu, dass die Verteilung der z-Komponente der Geschwindigkeiten und somit die Franck-Hertz Kurve abflacht und verbreitert.

Da für die Beobachtung der Kurve Zusammenstöße zwischen Elektronen und Hg-Atomen notwendig sind, nimmt der Dampfdruck des zu untersuchenden Stoffes Einfluss auf ebendiese Kurve. Es wird die mittlere freie Weglänge  $\overline{w}$  der Atome klein gegen den Abstand a zwischen Kathode und Beschleunigungselektrode gewählt und somit die Wahrscheinlichkeit der Zusammenstöße erhöht. Die Weglänge  $\overline{w}$  kann über den Druck  $p_{\text{sät}}$  in der

Glasglocke genau eingestellt werden und es folgt mit

$$\overline{w}\left[\text{cm}\right] = \frac{0,0029}{p_{\text{sät}}}\left[\text{mbar}\right]$$

ein Zusammenhang zwischen dem Sättigungsdampfdruck  $p_{\mathrm{sät}}$  und der Temperatur T

$$p_{\text{sät}}(T) = 5, 5 \cdot 10^7 e^{\frac{-6876}{T}}.$$
 (7)

Es muss  $\overline{w}$  etwa um 1000 bis 4000 mal kleiner eingestellt werden, als a. In der verwendeten Apparatur beträgt a etwa 1 cm.

### 3 Durchführung

Der Versuch wird nach Abbildung 4 aufgebaut. Um die Frank-Hertz Kurven aufzuzeichnen wird ein XY-Schreiber verwendet. Die Temperaturregelung erfolgt über ein separates Heizgerät.

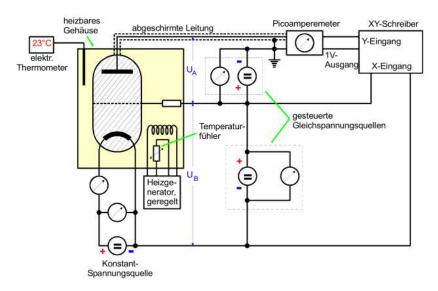


Abbildung 4: Schaltbild des im Versuch verwendeten Aufbaus [1].

Es wird zu Anfang die integrale Energieverteilung der Elektronen bestimmt. Dazu wird die Beschleunigungsspannung  $U_{\rm B}$  auf einen konstanten Wert von 11 V eingetellt und der Auffängerstrom in Abhängigkeit von der Bremsspannung, die in einem Bereich von 0 V bis 10 V aufgezeichnet wird, gemessen. Die integrale Energieverteilung wird einmal bei Raumtemperatur und zweimal bei erhöhter Temperatur in einem Bereich von 140 °C bis 160 °C gemessen.

In einem zweiten Durchführungsschritt werden zwei Franck-Hertz Kurven in einem Temeraturbereich von 160 °C bis 200 °C bei einer konstanten Bremsspannung  $U_{\rm A}$  von 1 V in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung von 0 V bis 60 V gemessen. Für die Auswertung wird diejenige Kurve verwendet, die am geeignetsten ist, also die Maxima und Minima am ausgeprägtesten sind.

### 4 Auswertung

#### 4.1 Bestimmung der freien Weglänge

Zunächst werden sowohl die Sättigungsdampfdrücke  $p_{\text{sätt}}$  aus  $\ref{aus}$ , als auch die mittleren Weglängen der Elektronen aus  $\ref{aus}$  für die verschiedenen Temperaturen, bei denen die Versuche durchgeführt werden, bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: Bestimmung der Sättigungsdampfdrücke sowie der mittleren Weglängen.

		mbar					
Verhaltnis of to fehlt!	T / K	$p_{\mathrm{s\ddot{a}tt}}/\mathrm{bar}$	$\bar{w} / 10^{-3} \text{m}$	Die	Größenordnung	passt	nicht ganz!
	300	0,0061	474				
	415	3,505	0,8274				
	430	$6,\!247$	$0,\!4642$				
	445	10,710	$0,\!2708$				
	460	17,726	$0,\!1636$				
	ìc	n komme hier au	f andere Nachkom	nma Stelle	in! =) Tabelle	. Ther	ruten!

Der Abstand zwischen Kathode und Beschleunigungselektrode beträgt bei der verwendeten Apparatur etwa 1 cm. Daraus folgt, dass die mittlere Weglänge im Mikrometerbereich liegen sollte. Es können demnach gute Franck-Hertz-Kurven bei Temperaturen von  $400\,\mathrm{K}$  bis  $450\,\mathrm{K}$  aufgezeichnet werden.

### 4.2 Integrale Energieverteilung

Wie bereits in der Durchführung erläutert wird eine feste Beschleunigungsspannung von  $U_b=11\,\mathrm{V}$  eingestellt und der Auffängerstrom gemessen. Um nun die integrale Energieverteilung bestimmen zu können, müssen mehrere Spannungswerte  $U_a$  gegen den dazugehörigen Wert

$$\Delta I_a \coloneqq I_a(U_a) - I_a(U_a + \Delta U_a) \tag{8}$$

aufgetragen werden. Dieser Zusammenhang beschriebt nach Gleichung 1 die Energieverteilung. Eine hohe Änderung von  $I_a$  entspricht einer hohen Anzahl von Elektronen, die ebendiese kinetische Energie besitzen und nun durch die Bremsspannung aufgehalten werden.

Die Messungen wurden einmal bei Raumtemperatur und einmal bei  $T=423,16\,\mathrm{K}$  durchgeführt. Die Ergebnisse sind für Raumtemperatur in Abbildung 5 und für  $T=423,16\,\mathrm{K}$  in Abbildung 6 dargestellt.

Und we want ihr des?
Also we light ever
Minimum? was eight
sich daraws für das
kontautpoteutial?


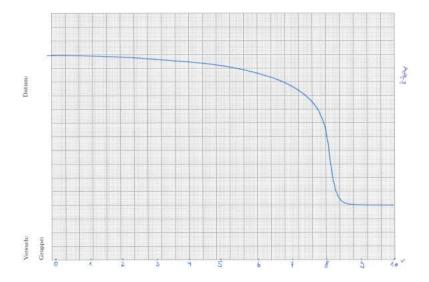


Abbildung 5: Energieverteilungsmessung bei Raumtemperatur.

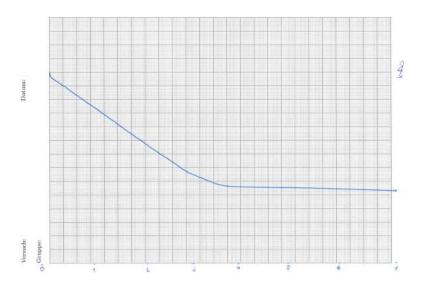


**Abbildung 6:** Energieverteilungsmessung bei  $T=423,16\,\mathrm{K}.$ 

Beide Kurven fallen kontinuierlich, jedoch unterschiedlich stark und weisen keine Peaks auf.

### 4.3 Interpretation der Franck-Hertz Kurven

Die Franck-Hertz-Kurve bei  $T=443,\!16\,\mathrm{K}$ ist in Abbildung 7 und die bei  $T=463,\!16\,\mathrm{K}$  in Abbildung 8 aufgezeichnet.

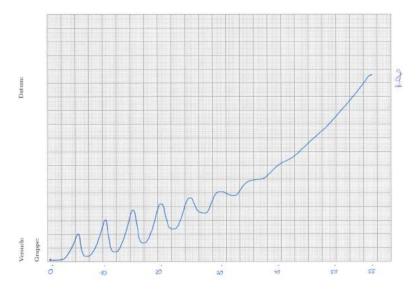

**Abbildung 7:** Franck-Hertz-Kurve bei  $443,16\,\mathrm{K}.$ 

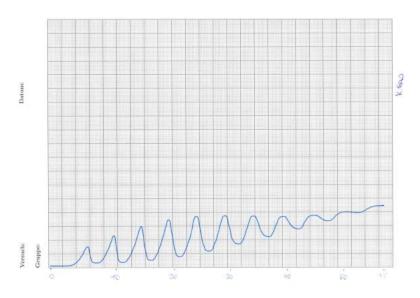


Abbildung 8: Franck-Hertz-Kurve bei  $463,16\,\mathrm{K}.$ 

Es wird zur Auswertung die Franck-Hertz-Kurve bei  $T=463,\!16\,\mathrm{K}$  verwendet. Die l<br/>hr solt beide Kurven auswerten!

ablesbaren Maxima befinden sich bei

$$\begin{split} &U_1 = 6,\!34\,\mathrm{V},\\ &U_2 = 10,\!98\,\mathrm{V},\\ &U_3 = 15,\!85\,\mathrm{V},\\ &U_4 = 20,\!73\,\mathrm{V},\\ &U_5 = 25,\!61\,\mathrm{V},\;\text{und}\\ &U_6 = 30,\!73\,\mathrm{V}. \end{split}$$

Daraus folgt als gemittelte Abstand der Maxima

$$\Delta U = (4.88 \pm 0.10) \text{ V}.$$

Nach ?? beträgt die Wellenlänge  $\lambda$  der emittierten Strahlung

$$\lambda = (254 \pm 4) \,\mathrm{nm}.$$

## 5 Diskussion viel zu kurt! Begründet bitte ausführlich warum belspielsweise die Temperatur so schwarlt!

Zusammenfassen kann gesagt werden, dass sämtliche Messungen erfolgreich verlaufen sind und sich die Ergebnisse größtenteils mit den Erwartungen decken.

Bei allen Messung ist anzumerken, dass die Messung der Temperatur wohl sehr ungenau ausgefallen ist. Nach Erhöhungen der Heizleistung, zeigte der Temperaturmesser zum Beispiel teils niedrigere Temperaturen an. Darüber hinaus schwankte die gemessene Temperatur auch bei konstanter Heizleistung teils stark.

Die Abstände der Maxima bei den Franck-Hertz-Kurven wurden als  $\Delta U = (4.88 \pm 0.10) \,\mathrm{V}$  gemessen. Die Abweichung zum Literaturwert von 4,9 V beträgt 0,41%.

#### Literatur

[1] Der Franck-Hertz-Versuch. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2022.